

VANTELIN Support for e-SPORTS

THUMB ARMOR

La muñequera VANTELIN Support for e-SPORTS Thumb Armor para gamers brinda un ajuste personalizado para la articulación y el músculo. Brinda estabilidad y soporte avanzado para el pulgar, perfecta para e-sports y uso diario.

Protege tus articulaciones y músculos con tecnología de vendaje taping.

GUÍA DE TALLAS

S/M: 17-19 cm

M/L: 19-21 cm

Mida alrededor del dorso de la mano con los dedos extendidos como se muestra en la imagen. Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS


	Estructura de taping en forma de Y La estructura de taping en forma de Y alrededor del pulgar suprime el movimiento excesivo del dedo. Alivia las molestias del pulgar.
	Estructura de taping tipo Sándwich Su estructura de taping tipo Sándwich adyacente al pulgar y el dedo meñique suprime el movimiento lateral excesivo de la muñeca. Alivia las molestias de la base del pulgar y la muñeca.
	Estructura de anclaje Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping.

INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Inserte la mano: coloque el pulgar en el orificio más pequeño como se muestra en la ilustración.

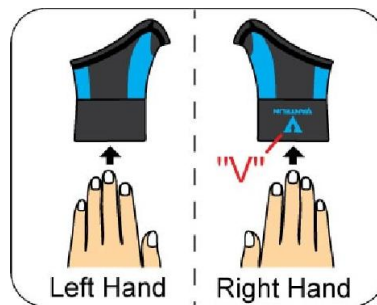

2. Ajuste la ubicación de su pulgar para que quede posicionado en el centro de la forma de Y.



* Tenga cuidado que sus uñas no se enganchen. Use directamente sobre la piel.

* El símbolo «V» será posicionado en el dorso de la mano al ser usado en la mano derecha, y en el lado de la palma al ser usado en la mano izquierda.

ADVERTENCIA

No utilizar si tiene:

1. Anormalidades incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, etc.
 2. Trastornos vasculares periféricos.
 3. Anormalidades como alguna lesión, hinchazón o sarpullido en donde se va a utilizar el producto.
 4. Dermatitis crónica, alergia a textiles, químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido/enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
 - Use la talla correcta.

- No utilice mientras duerme.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Use malla de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30º C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokio, JAPÓN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan