


INSTRUCCIONES DE USO**VANTELIN CODO DE APOYO****GUÍA DE TALLAS**

S: 7.5-9 in / 19-22 cm

M: 9-10 in / 22-25 cm

L: 10-11 in / 25-28 cm

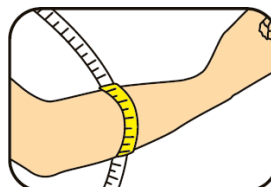

Mida alrededor del antebrazo como se muestra. Si se aplican dos tallas, elija la mayor.

Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS

 Codo interior	Estructura de taping en forma de X La estructura de taping en forma de X en el interior del codo limita el movimiento excesivo y reduce las molestias al levantar objetos pesados.
 Codo exterior	Paneles de malla ventilados La estructura de malla de punto situada en la parte exterior del codo permite que la sujeción se adapte al movimiento del codo.
	Estructura de anclaje Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping en forma de X.

INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.


INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice el brazo dentro en el soporte del codo con la parte inferior de la "V" apuntando hacia abajo.
2. Coloque la malla de punto en forma de X en la parte interior del codo, con el centro de la X alineado con el pliegue del codo.

Estire la ortesis para que no se amontone al doblar ligeramente el codo.

- Use siempre directamente sobre la piel.
- En el caso que la codera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.

*Las funciones que se obtienen con el uso de la codera pueden variar según cada persona.

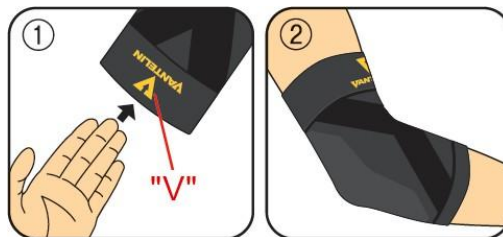

ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor intenso debido a esguince, fractura o lesión de ligamentos, etc., (2) trastorno vascular periférico, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos textiles o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si experimenta síntomas como: sarpullido/enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilizar mientras duerme

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Utilizar red de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30°C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN.

LUGAR DE FABRICACIÓN

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan