

INSTRUCCIONES DE USO**VANTELIN: TOBILLERA****GUÍA DE TALLAS**

S: Mujer: 4.5-6.5 in / 22-24 cm

Hombre: 4-6 in / 22-24 cm

M: Mujer: 6.5-8.5 in / 24-26 cm


Hombre: 6-8 in / 24-26 cm

L: Mujer: 8.5-10.5 in / 26-28 cm

Hombre: 8-10 in / 26-28 cm

Si la medida se encuentra entre dos tallas, elija la más grande.

CARACTERÍSTICAS

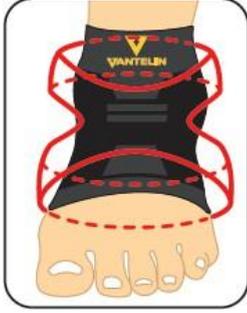
	<p>Estructura de taping en forma de 8</p> <p>La malla tejida en forma de 8 se envuelve alrededor del tobillo y el pie para brindar apoyo adicional a las articulaciones al momento de correr, caminar y realizar actividades diarias.</p>
	<p>Estructura de taping de Soporte del Arco</p> <p>La estructura de taping de soporte del arco levanta el arco del pie para mejorar su función de amortiguación y reducir la fatiga.</p>
	<p>Estructura de anclaje</p> <p>Bordes firmes y especialmente confeccionados sin costura que previenen el deslizamiento y estabilizan la estructura de taping en forma de 8.</p>

INDICACIÓN

Utilizar para molestias diarias en las articulaciones.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Deslice el pie dentro de la tobillera con la parte inferior de la "V" apuntando hacia abajo.
 2. Ajuste la tobillera al tobillo sin holgura.
 - Use siempre directamente sobre la piel.
 - En el caso que la tobillera no esté posicionada correctamente, es posible que no funcione según lo previsto.
- *Las funciones que se obtienen con el uso de la tobillera pueden variar según cada persona.

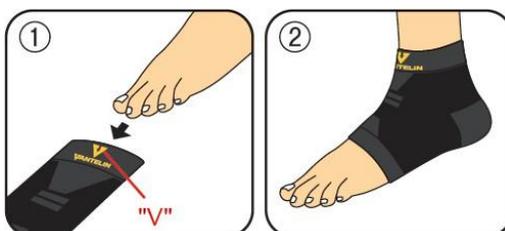

ADVERTENCIA

- No utilizar si tiene: (1) anomalías incluyendo hinchazón o dolor fuerte debido a un esguince, fractura, lesión de ligamentos, ect., (2) trastornos vasculares periféricos, (3) anomalías como alguna lesión, hinchazón, o sarpullido en donde se va a utilizar el producto, o (4) dermatitis crónica / alergia a textiles químicos o látex. Detenga su uso inmediatamente y consulte a su médico si presenta síntomas como: sarpullido / enrojecimiento, picazón, erupción, congestión, dolor anormal o hinchazón.
- Use solamente según lo indicado.
- Use la talla correcta.
- No utilice mientras duerme.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO (Use malla de lavandería)

1. Lavar por separado, por debajo de los 30° C.
2. No usar blanqueador.
3. No secar a máquina.
4. Colgar y secar al aire. Evite que reciba luz solar directamente.
5. Planchar a baja temperatura. No planchar con vapor.
6. No lavar en seco.

PRECAUCIONES PARA ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN

1. Mantener alejado del fuego o del calor excesivo.
2. Mantener fuera del alcance de los niños.
3. Existe el riesgo de romper el producto si es usado de manera incorrecta o si se aplica una fuerza parcialmente desmedida.

PRESENTACIÓN

1 unidad

FABRICADO POR:

Kowa Company, Ltd.

4-14, Nihonbashi-honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN

LUGAR DE FABRICACIÓN:

IIDA HOSIERY CO., LTD.

1619, Yamaguchi, Kouhoku-machi, Kishima-gun, Saga-Ken 849-0501 Japan